


# 使用说明书

1. 第一次使用需要对摄像头进行配置打开 D 盘中的”维氏显微硬度 1.0”文件夹




2. 点击” amcap.exe”如图


3. 在出现的对话框的左上方点击红圈中的 ”Devices”按钮,然后看蓝圈中的 ”RZ300C”前面是否已经打勾,若没有打勾请在 ”RZ300C” 上点击,若已打勾则点击红圈右边的”选项”按钮

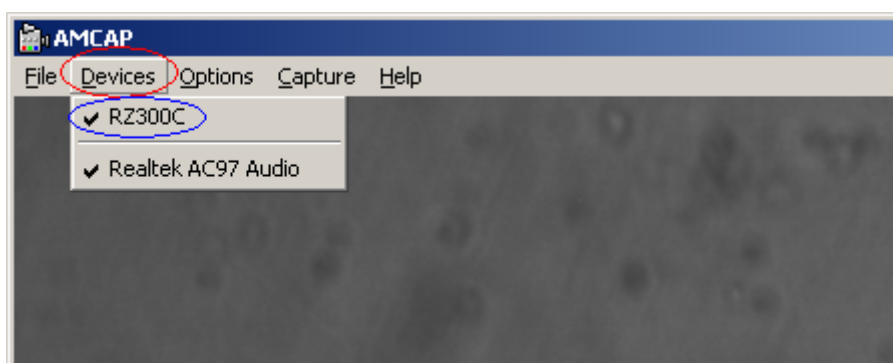


执行好上步后, 看下图, 如果红圈中的 “Preview” 按钮前没有打勾请点击 “Preview”, 然后点击蓝圈中的 “Video Capture Filter...” 按钮

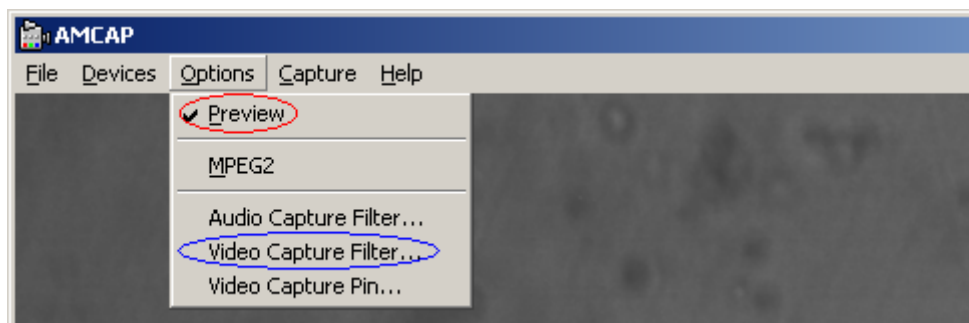


4. 执行完上步弹出如下对话框, 点击红圈中按钮

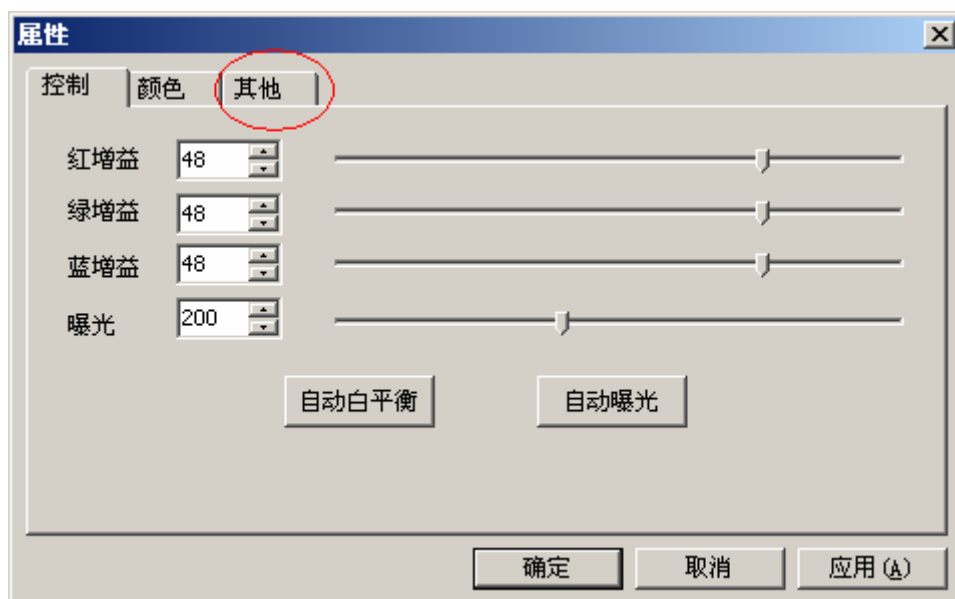


5. 出现如下对话框，在红圈中的黑白显示前打勾，然后点击蓝圈中的按钮

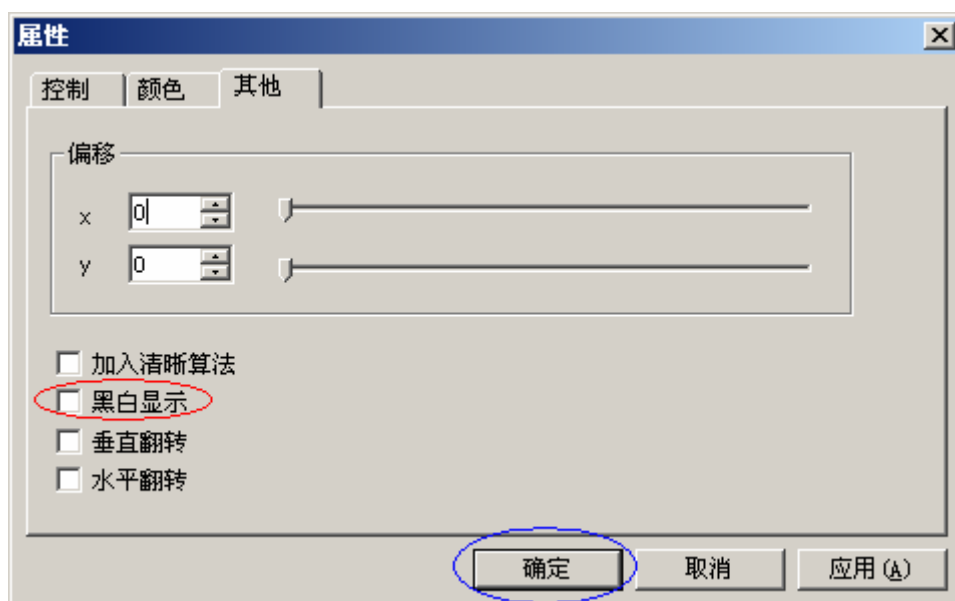

6. 再次点击红圈中“Options”按钮，然后点击蓝圈中“Video Capture Pin...”按钮

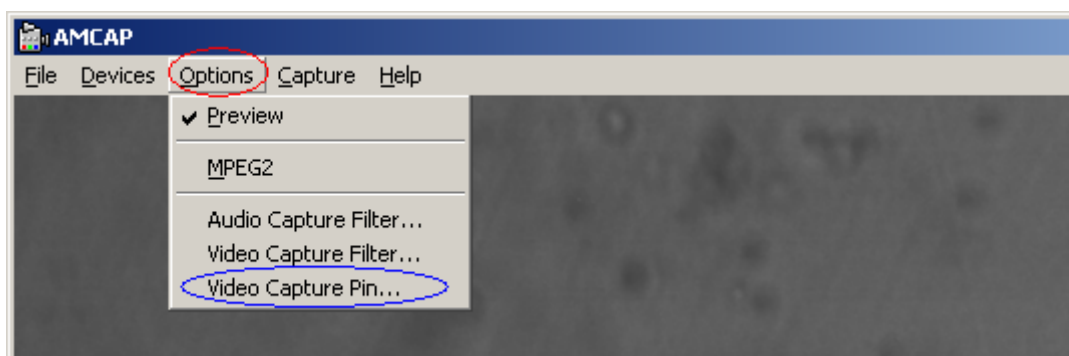

7. 弹出如下对话框，点击红圈中那一行，然后点击蓝圈中的“确定”

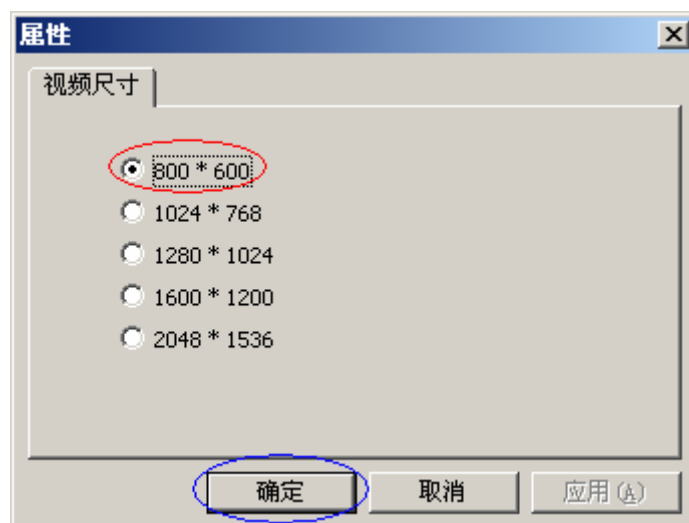

摄像头设置完成，关闭这个程序

（备注：此摄像软件能同时适用于模拟信号的摄像头和数字信号的摄像头，但由于视频捕捉卡的优先级比 USB 摄像头的优先级高，因此，如果在安装有视频捕捉卡的电脑上使用 USB 数字摄像头，必须先卸载视频捕捉卡相关程序以及拿下视频捕捉卡，此摄像头不可与已安装视频捕捉卡的电脑上使用，否则，摄像功能默认使用视频捕捉卡上的摄像功能）

摄像头设置大同小异，如有更改恕不另行通知。